

HNO Behandlungsstühle

ATMOS® Chair Comfort ATMOS® Chair Professional

Das zentrale Element im Workflow



PATIENTENSTÜHLE, ARZTHOCKER

Behandlungsstühle

Kombination von Design, Technik und Komfort

Das zentrale Element in einem HNO-Behandlungsraum ist der Patientenstuhl: Sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Patienten darauf sicher und wohl fühlen – mit einem ATMOS® Chair. Durch ihre weiche und extrem strapazierfähige Oberfläche setzen unsere Stühle neue Standards - und das zu einem attraktiven Preis. Sie zeichnen sich durch modernstes Design und tolle Haptik aus. Der dazugehörige Arzthocker erfüllt alle sicherheitsrelevanten Anforderungen und ermöglicht ein leichtes Anpassen für eine optimale Patienten-Arzt-Positionierung.



PATIENTENSTUHL

ATMOS® Chair Comfort

Basic & Sync

Die Basisausführung ATMOS® Chair Comfort ist der optimale Behandlungsstuhl für die tägliche Arbeit in Ihrem HNO-Behandlungsraum.



ATMOS Stoffprägung

Ein besonderes Highlight stellt die Logo-Prägung in der Rückenlehne dar. Es ist ein dezenter Hinweis auf die exklusive und hochwertige Fertigung des Stuhles in Handarbeit.



Klappbare Armlehne

Die Armlehnen bewegen sich synchron mit der Rückenlehne und sind einzeln abklappbar. Der Patient kann somit optimal erreicht werden.



Variable Fußstütze

Die Fußstütze ist je nach Anforderung über eine Lasche ausklappbar oder integriert sich nahtlos in das Design des Stuhles.



Flexible Kopfstütze

Die Kopfstütze ist mit einem einfachen Handgriff einstellbar. Auch sehr große Patienten können so entspannt im Stuhl sitzen.



Synchrone Verstellung

Rückenlehne und Beinauflage sind auch über die Waagerechte hinaus synchron verstellbar. Dies sichert im Bedarfsfall eine schnelle Kollapslagerung.



Hydraulische Höhenverstellung

Die Höhe des Stuhles wird mit dem Fuß einfach über einen Pumphebel geregelt. Sie haben während der Behandlung die Hände frei.



PATIENTENSTUHL

ATMOS® Chair Professional

Basic, Electrical, Mobile, Complete

Die neue Produktlinie ATMOS® Chair Professional glänzt durch ein neues, modernes Design und erreicht durch das innovative Bezugsmaterial „Premium“ ein neues Level an Komfort.



360° Drehbarkeit

Das Stuhloberteil ist um 360° drehbar und dank beidseitig angebrachtem Arretierungshebel in jeder Position fixierbar. Bei der elektrischen Liegeflächenverstellung ist die Drehbarkeit auf ca. 330° beschränkt.



Elektrische Höhenverstellung

Der Stuhl ist in einem Bereich von 30 cm höhenverstellbar. Die Verstellung erfolgt über einen integrierten oder separaten Fußschalter.

Elektrische Rückenlehne

Die Rückenlehne des ATMOS® Chair Professional ist stufenlos von ca. 7° Vorneigung bis zur 90° Kollapslagerung einstellbar.

Die Armlehnen sind einzeln klappbar und bewegen sich synchron mit der Rückenlehne.



Drehbare Sitzfläche

Auf der optional erhältlichen drehbaren Sitzfläche kann der Patient schnell um 90° nach links oder rechts gedreht werden, ohne die Ausrichtung des kompletten Stuhles zu ändern.



Mobilität

Dank der integrierten Rollen wird eine uneingeschränkte Mobilität erreicht. Der komplette Stuhl kann ohne große Anstrengung bewegt oder bei Bedarf auch ganz aus dem Behandlungsraum geschoben werden.



ARZTHOCKER

ATMOS® Chair Doctor

Handverstellung, Fußverstellung

Die ATMOS® Chair Doctor Arzthocker bieten optimale Voraussetzungen für eine möglichst rücken-schonende und ergonomische Arbeitshaltung.



Innovatives Material

Das Material der ATMOS® Chair Produkte ist in jeweils sieben Standardfarben erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen den Linien „Compact“ und „Premium“.

Unser Premiummaterial besticht durch seine weiche Haptik und verfügt über eine enorme Strapazierfähigkeit. Die Abriebsfestigkeit ist dreimal höher als bei herkömmlichen Materialien.



Saubere Fußverstellung

Durch einfaches Tippen auf die ringförmige Bodenplatte kann die gewünschte Sitzhöhe eingestellt werden. Die Hände bleiben frei.



Verstellbare Armauflage

Die Rückenlehne der ATMOS® Chair Doctor kann gedreht und zur Armauflage umfunktioniert werden.



Klassische Handverstellung


In der altbewährten Variante wird durch leichtes Ziehen am Handhebel die Sitzhöhe verstellt.



PATIENTENSTÜHLE, ARZTHOCKER

Gesamtüberblick

ATMOS® Chair Comfort, ATMOS® Chair Professional,
ATMOS® Chair Doctor

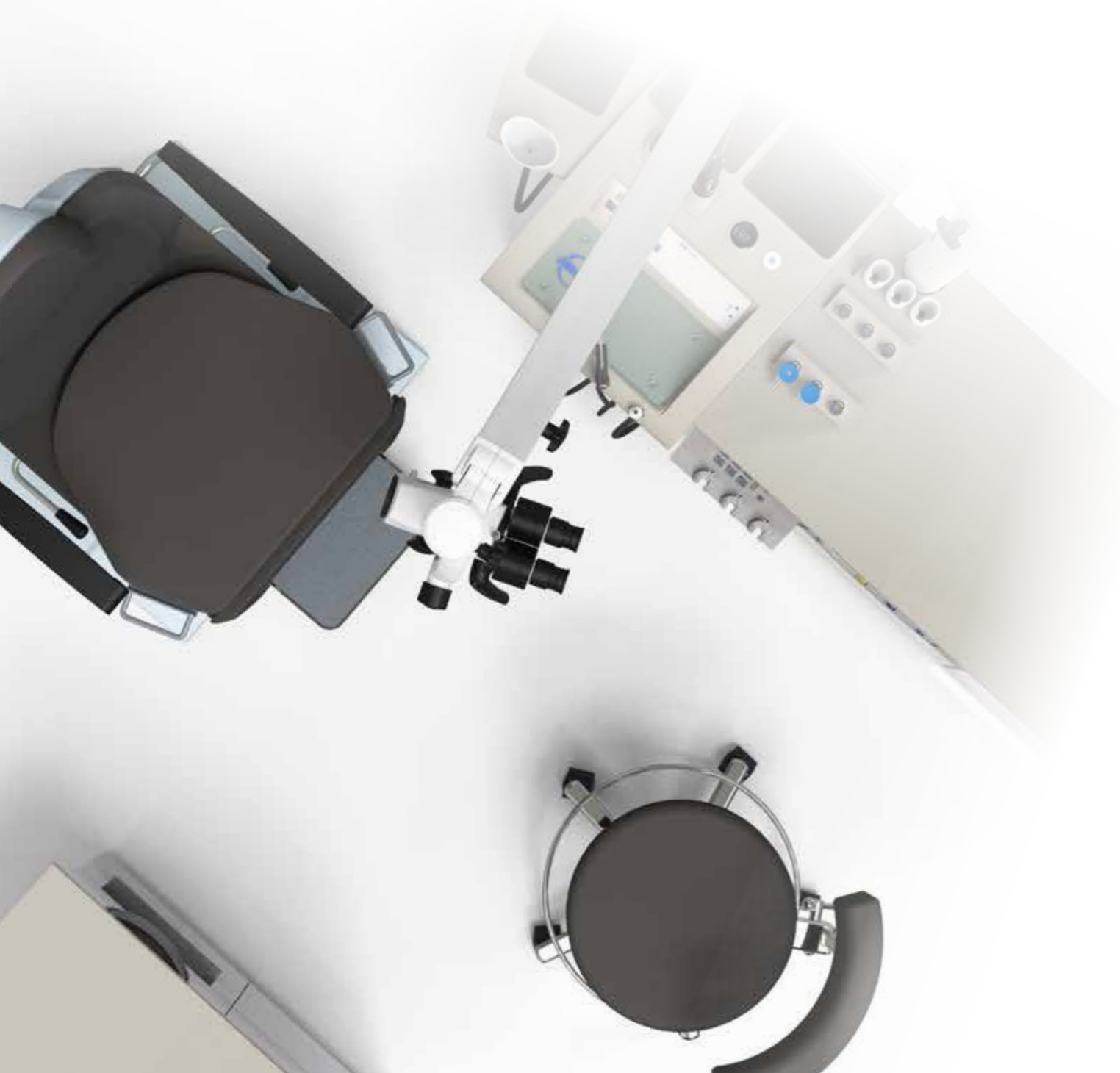

ATMOS® Chair	Comfort Basic	Comfort Sync	Professional Basic	Professional Electrical	Professional Mobile	Professional Complete
Einstiegsitzhöhe	56 cm		58 cm			
Sitzhöhe verstellbar	manuell		elektrisch			
Sitzfläche drehbar	-		optional			
Max. Hublast	150 kg		200 kg			
Rückenlehne verstellbar	manuell		manuell	elektrisch	manuell	elektrisch
Fußstütze	fix	synchron mit Rückenlehne	synchron mit Rückenlehne			
Mobilitätsfunktion	-		-		✓	

Innovatives Bezugsmaterial


Weiches Kunstleder garantiert höchsten Sitzkomfort

- Sanfte Haptik
- Einfach zu reinigen
- Enorm strapazierfähig und abriebfest (bis zu drei Mal höher als bei herkömmlichen Materialien)

Standard-Farben ATMOS® Chair



Premium-Farben ATMOS® Chair

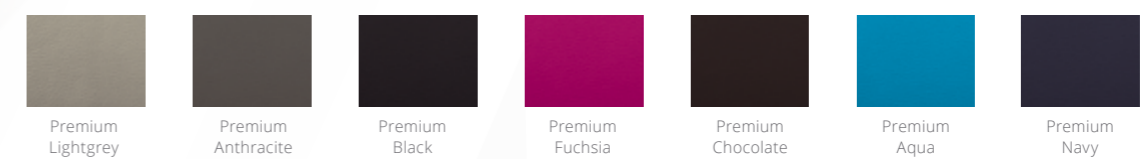



MedizinTechnik

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch/Germany
Tel: +49 7653 689-0
info@atmosmed.com

www.atmosmed.de